

1 8860 GC System Ship Kit G3450-60585

Agilent GC and GC/MS User Manuals and Tools G4600-64006

Safety Information G2790-90011

2 Remove Protective Packaging
 Remova a Embalagem de Proteção
 Удалите защитную упаковку
 保護梱包材を外します
 移除保护包装

3

LAN

4

5 Select Settings tab to enter Network Information
 Seleccione a guia Parâmetros para inserir informações da rede
 Выберите вкладку Settings и введите информацию о сети
 設定 タブを選択してネットワーク情報を入力します
 选择“设置”选项卡输入网络信息

6 Access the Browser Interface to configure the GC and get detailed installation instructions by connecting to the GC via your web browser (no internet required).
 The GC and PC must be configured on the same gateway (for example, isolated LAN).
 Acesse a Interface do Navegador para configurar o GC e obter instruções detalhadas de instalação conectando-se ao GC através do seu navegador da Web (não é necessário usar a Internet).
 O GC e o PC devem ser configurados no mesmo gateway (por exemplo, uma LAN isolada).
 Войдите в интерфейс веб-браузера и получите подробные инструкции по установке, подключившись к ГХ через веб-браузер (подключение к интернету не требуется).
 ГХ и ПК должны быть сконфигурированы в едином сетевом интерфейсе (например, изолированный LAN).
 ウェブブラウザを使用して GC のブラウザインターフェイスに接続し、詳細なインストール手順を取得してください（インターネットに接続する必要はありません）。
 GC と PC は同じセグメント上（独立した LAN など）に設定してください。
 访问浏览器界面配置 GC 并通过网络浏览器（不需要互联网连接）连接到 GC 获取详细的安装说明。GC 和 PC 必须配置到相同网关（例如，独立的局域网中）。


Browser Interface
 Provides instrument control

Installation instructions
<http://10.1.1.101>
<http://10.1.1.101/install>

Where to find additional information
 Onde encontrar informação adicional
 Где найти дополнительную информацию
 追加情報を検索する方法
 如何获得相关信息

Accessing Help and Information from Agilent Data Systems
 Acessando Ajuda & Informação através do Sistemas de Dados da Agilent
 Доступ к справке и информации по из системы данных Agilent
 Agilent データシステムから ヘルプと情報にアクセスできます
 通过 Agilent 数据系统访问 帮助和信息

Help and Information
<http://10.1.1.101/info>

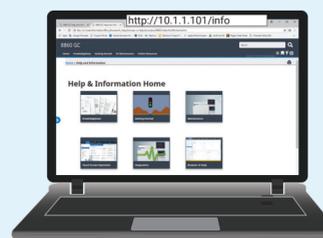

GC and GC/MS
User Manuals & Tools

